

WillowWood

**LimLogic®
Communicator**

Clever verbunden.

Software Installation



⚠ Schließen Sie den Communicator nicht an den PC an, bis Sie dazu aufgefordert werden.

Hardware- und Software-Voraussetzungen

Betriebssystem	Windows® 7 oder 8.1 mit installiertem .NET Framework 4.5.1
CPU	Intel® i3 oder AMD® A8 oder Phenom II X3 mit 2.0 GHz oder schneller
Arbeitsspeicher	2 GB RAM
Festplatte	1 GB freier Speicherplatz
Grafikkarte	Grafikkarte kompatibel mit DirectX 11 oder Open GL 4.0. Das System sollte eine Auflösung von mindestens 1024 x 768 unterstützen, und über 1GB Memory verfügen. Wir empfehlen, die vom Händler empfohlenen Grafiktreiber zu verwenden.
Sonstige Anforderungen	USB Anschluss. Ein Internetzugang oder ein Netzwerkzugang sind empfehlenswert, um Updates und Zugriff auf zusätzliche Funktionen zu erhalten. Die Software kann nicht auf einem Mac oder mit einem Windows-Emulator verwendet werden.

Hinweis: Die Systemanforderung eines Computers, auf dem das Omega-System installiert ist, entspricht der Konfiguration, die für die LimLogic Communicator Software notwendig ist.



1. Laden Sie unter <https://www.willowwoodco.com/products-services/elevated-vacuum/limblogic-communicator/> im Bereich **Resources and Related Products** das Communicator-Installationsprogramm herunter und starten Sie es.
2. Wenn sich das rechts abgebildete Fenster öffnet, klicken Sie auf **Yes**, um die Installation fortzuführen.



3. Nun öffnet sich der **Begrüßungsbildschirm (LimbLogic® Communicator 2015 Q2 Setup)**. Klicken Sie auf **Next**.



4. Wenn sich die AGB (**License Agreement**) öffnen, so lesen Sie sich diese bitte durch, und klicken Sie auf **I Agree**.



5. Dann öffnet sich das Fenster, bei dem Sie den Speicherort wählen können (**Choose Install Location**). Klicken Sie hier auf **Install**. Wir empfehlen, den vorgeschlagenen Speicherort zu verwenden.



6. Im nächsten Fenster (Installing) wird der Fortschritt der Installation angezeigt.



7. Schließen Sie den Communicator an einen USB-Anschluss an Ihrem PC an. Klicken Sie dann auf **OK**.



8. Wenn der Bildschirm zur **Fertigstellung** der Installation (**Completing LimbLogic® Communicator 2015 Q2 Setup**) erscheint, klicken Sie **Finish**.

9. Auf Ihrem Desktop wird nun ein LimbLogic® Communicator-Symbol erscheinen.

⚠ Do not plug in the communicator until promoted.

Recommended Setup - Windows

Operating System	Windows® 7 or 8.1 with .NET Framework 4.5.1 installed
CPU	Intel® i3 or AMD® A8 or Phenom II X3 at 2.0 GHz or faster
Memory	2 GB RAM
Hard Drive	1 GB of free space
Graphics	DirectX 11 or OpenGL 4.0 compatible video card. Support for at least 1024 x 768 resolution and 1GB memory minimum. Use of vendor provided graphics drivers is highly recommended.
Other	USB port. In order to access updates and additional features, network and/or Internet connectivity is highly recommended. Use on a Mac or through Windows emulation is not supported.

Your LimbLogic Communicator software will perform well if installed on your existing OMEGA® System computer.



1. Download and run the Communicator software installer from <http://www.willowwoodco.com/products-and-services/elevated-vacuum/limblogic-communicator> under the **Resources & Related Products** section.
2. If the prompt shown at right appears, click **Yes** to continue the installation.



3. The **Welcome** screen will appear automatically. Click Next.




4. When the **License Agreement** screen appears, please review the agreement, then click **I Agree**.



5. On the **Choose Install Location** window, click on **Install**.

Changing the installation location from the default location that is shown here is not recommended.

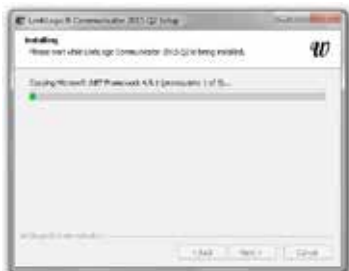

6. As the installation progresses, its status is displayed on the screen.



7. When prompted, insert the **Communicator** into a USB port on your PC. Click **OK**.



8. When the **Completing the LimbLogic Communicator Setup Wizard** window appears, click the **Finish** button.

9. A LimbLogic Communicator icon will appear on your computer's desktop.

Vertrieb durch:
Distributed by:



Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.teufel-international.com



WillowWood™

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
www.willowwoodco.com

Ohio Willow Wood Company B.V
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
The Netherlands

