

Alpha DESIGN® Liner

Der Problemlöse-Liner



- ▶ Individuell gefertigt
- ▶ Für Anwender mit markanten Stumpfverhältnissen
- ▶ Einzigartige Produktlösung



◆ Alpha DESIGN® Liner

Alpha DESIGN Liner sind individuell für jeweils einen Prothesenträger gefertigte Liner, die die Oberflächenstruktur des Stumpfes in allen notwendigen Details abbilden.

Dies bedeutet, dass beispielsweise Narbeneinzüge des Stumpfes in der Innenstruktur des Liners 1:1 abgebildet werden können. Damit wird sichergestellt, dass der Liner auch in diesen Bereichen vollständig anliegt.

Die Gel-Stärke eines Alpha DESIGN Liner kann Übergangslos von 3 - 25 mm variiert werden, wodurch eine optimale Modellierung des Liners möglich ist.

Erhältlich sind Alpha DESIGN Liner in verschiedenen Materialien und Texturen sowie auch als DUO-Liner ohne Textur.

Bitte beachten Sie, dass DESIGN Liner aufgrund der individuellen Fertigung nicht retournierbar sind.

Alpha DESIGN® Liner - Der Problemlöse-Liner

Der Alpha DESIGN Liner ist eine einzigartige Produktlösung für alle Anwender, bei denen aufgrund markanter Stumpfverhältnisse wie z. B. prominenter Narbeneinzüge die Versorgung mit einem konfektionierten Liner keine zufriedenstellende Lösung ergibt.



Scannen des Stumpfes durch Scanservice WJT bei Ihnen vor Ort

Modellieren des DESIGN Liners gemeinsam mit Ihnen

Alternativ: Scannen des Stumpfes durch Sie, mittels Omega Scanner und Software

Modellieren des DESIGN Liners durch Sie, nach Schulung durch WJT

Duplikat: ein bestehender Liner kann dupliziert werden, ohne erneuten Scan

Senden der Daten an Zentrale WJT, Prüfung der Daten

DESIGN Liner wird individuell gefertigt


Liner wird Ihnen zugesandt

Material	Classic-Gel, Hybrid-Gel, Soft Silikon, Silikon
Stoffüberzug	Original ¹⁾ , Spirit ²⁾ , MAX ³⁾ , Select ⁴⁾ , ohne Textur ⁵⁾
Farbe	Entsprechend Stoffüberzug
Adaption	In Locking- und Cushion-Ausführung erhältlich
Profil/Tasse	Profile: nach Maß
Gesamtlänge	48 cm (-2,5 cm bis +1,5 cm)

- ¹⁾ Original: Feines, gleichzeitig robustes Nylon-Gewebe. Die Dehnfähigkeit des Classic-Gels wird unterstützt.
- ²⁾ Spirit: Robustes Gewebe, besonders flexibel für leichtes Anziehen. Der Spirit-Überzug ist klettfähig.
- ³⁾ MAX: Frottiertes Gewebe, gut zur Verwendung mit Unterdrucksystemen geeignet.
- ⁴⁾ Select: Funktionelles Gewebe, nahezu null Elongation, Druckreduzierung auf Patella, optimal für Unterdrucksysteme.
- ⁵⁾ Ohne Textur: DUO-Liner innen mit Classic-Gel, außen Silikon, ohne zusätzlichen Stoffüberzug.

Oberschenkel: Naht in AP-Richtung

Unterschenkel: Naht in ML-Richtung

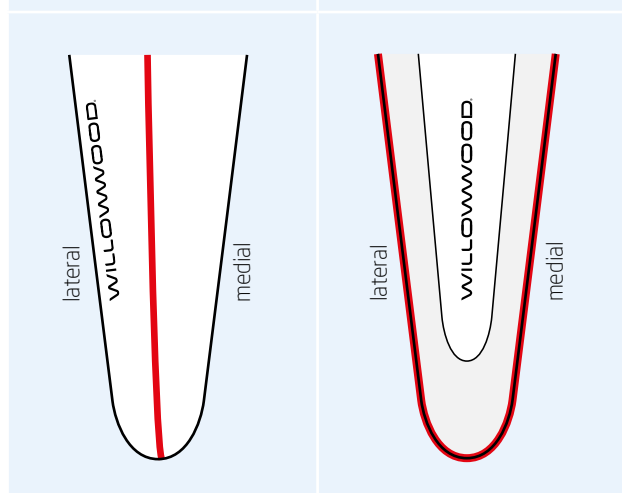

— Nahtverlauf

Alpha DESIGN® Liner - Nahtverlauf

Der Nahtverlauf bei den Alpha DESIGN Linern dient als Hilfestellung für das richtige Anziehen des Liners. Dadurch wird gewährleistet, dass die Innenstruktur an der richtigen Stelle des Stumpfes sitzt.

Bei DESIGN Linern für den Oberschenkel soll die Naht in AP-Richtung verlaufen.

Bei DESIGN Linern für den Unterschenkel soll die Naht in ML-Richtung verlaufen.

Alpha DESIGN® Locking-Liner

REF Locking-Liner	Produkt	Material	Stoffüberzug	Fertigungsbasis
WW.ALL-DES-CS	Design LockingLiner Classic Select	Classic-Gel	Select	Fertigung nach Scan
WW.ALL-DES-CSDP	Design LockingLiner Classic Select Dup.	Classic-Gel	Select	Duplikat (eines bestehenden Liners)
WW.ALL-DES-HS	Design LockingLiner Hybrid Select	Hybrid-Gel	Select	Fertigung nach Scan
WW.ALL-DES-HSDP	Design LockingLiner Hybrid Select Dup.	Hybrid-Gel	Select	Duplikat (eines bestehenden Liners)
WW.ALL-DES-OT	Design LockingLiner Classic Classic	Classic-Gel	Original	Fertigung nach Scan
WW.ALL-DES-DP	Design LockingLiner Classic Classic Dup.	Classic-Gel	Original	Duplikat (eines bestehenden Liners)
WW.ELL-DES-OT	Design LockingLiner Express Select	Soft Silikon	Select	Fertigung nach Scan
WW.ELL-DES-DP	Design LockingLiner Express Select Dup.	Soft Silikon	Select	Duplikat (eines bestehenden Liners)

Alpha DESIGN® Cushion-Liner

REF Cushion-Liner	Produkt	Material	Stoffüberzug	Fertigungsbasis
WW.ALC-DES-CS	Design CushionLiner Classic Select	Classic-Gel	Select	Fertigung nach Scan
WW.ALC-DES-CSDP	Design CushionLiner Classic Select Dup.	Classic-Gel	Select	Duplikat (eines bestehenden Liners)
WW.ALC-DES-HS	Design CushionLiner Hybrid Select	Hybrid-Gel	Select	Fertigung nach Scan
WW.ALC-DES-HSDP	Design CushionLiner Hybrid Select Dup.	Hybrid-Gel	Select	Duplikat (eines bestehenden Liners)
WW.ALC-DES-OT	Design CushionLiner Classic Classic	Classic-Gel	Original	Fertigung nach Scan
WW.ALC-DES-DP	Design CushionLiner Classic Classic Dup.	Classic-Gel	Original	Duplikat (eines bestehenden Liners)
WW.ELC-DES-OT	Design CushionLiner Express Select	Soft Silikon	Select	Fertigung nach Scan
WW.ELC-DES-DP	Design CushionLiner Express Select Dup.	Soft Silikon	Select	Duplikat (eines bestehenden Liners)
WW.ADC-DES-OT	Design CushionLiner Duo	Classic-Gel / Silikon	ohne Textur	Fertigung nach Scan
WW.ADC-DES-DP	Design CushionLiner Duo Duplikat	Classic-Gel / Silikon	ohne Textur	Duplikat (eines bestehenden Liners)



Wilhelm Julius Teufel GmbH
 Robert-Bosch-Straße 15
 73117 Wangen
 Deutschland/Germany
 Phone: +49 (0)7161 15684-0
 Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.wjt-ortho.com

