

Der neue Alpha® SmartTemp Liner. Die Innovation mit Temperatúrausgleich.

Zu heiß? Alpha® SmartTemp speichert überschüssige Wärme.

Zu kalt? Alpha® SmartTemp gibt Wärme wieder ab.

Genau richtig! Alpha® SmartTemp reguliert den Wärmehaushalt dank Outlast®-Technologie

Alpha® SmartTemp.
Genau richtig.



Zu kalt.

Zu heiß.




◆ Alpha® SmartTemp-Liner


Der Alpha® SmartTemp-Liner stellt eine Innovation im Bereich der Liner-Versorgung dar. Durch die Integration eines temperaturregulierenden Materials auf Basis der Outlast®-Technologie ist der Liner in der Lage, Temperaturschwankungen des Stumpfes aufzunehmen und dadurch ausgleichend auf den Temperaturhaushalt des Anwenders zu wirken. Wärme oberhalb des Komfortbereichs wird aufgenommen, gespeichert und bei Unterschreiten des Komfortbereichs wieder abgegeben. In umgekehrter Weise werden Kälteeinflüsse in ihrer Auswirkung deutlich reduziert, da zuvor gespeicherte Wärme an die Oberfläche abgegeben wird. Der einzigartige SmartTemp-Liner sorgt für ein signifikantes Plus an Tragekomfort in den unterschiedlichsten Alltagssituationen.

Material	Silicone mit Outlast®
Stoffüberzug	Select
Adaption	In Locking- und Cushion-Ausführung erhältlich
Tasse	Uniform: Ziehharmonika Progressive: Ziehharmonika
Kompatibilität	Uniform: zu allen Alpha® Uniform Linern Progressive: zu allen Alpha® Progressive Linern


◆ Uniform-Ausführung

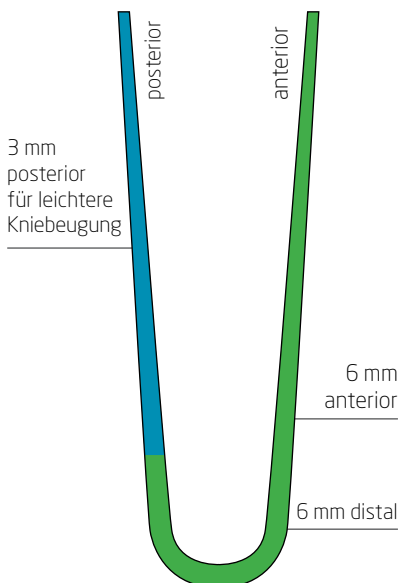


◆ Progressive-Ausführung

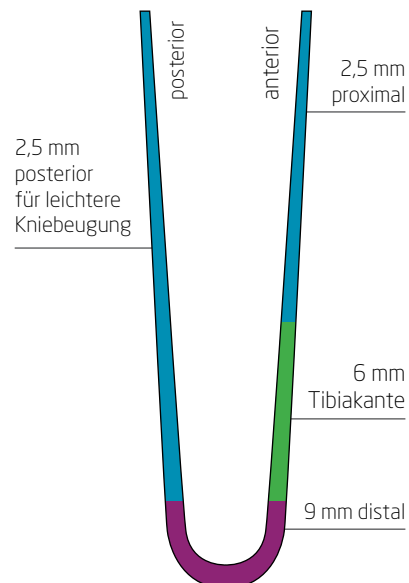

◆ Alpha® SmartTemp-Liner Maßtabelle Uniform

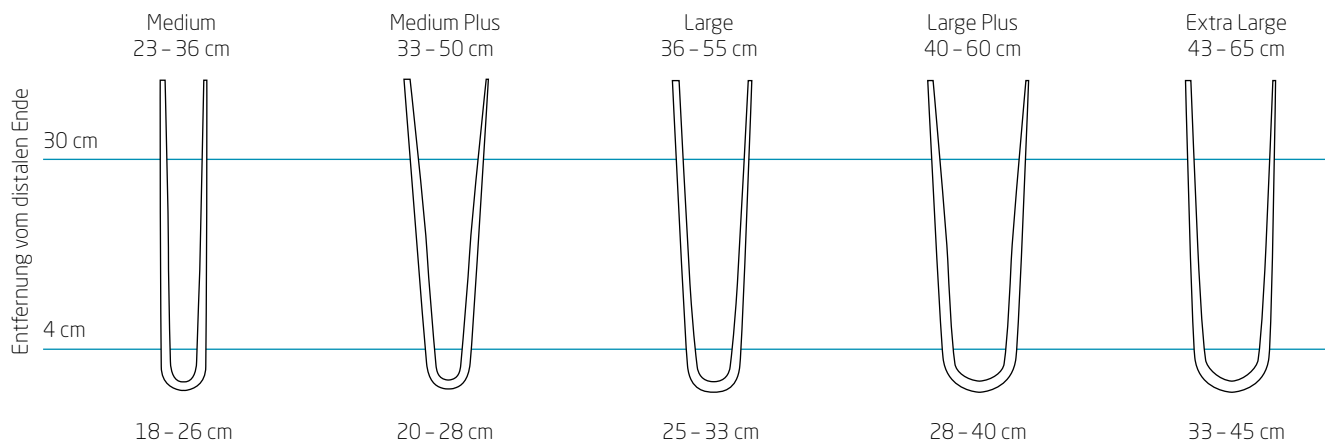

◆ Alpha® SmartTemp-Liner Maßtabelle Progressive

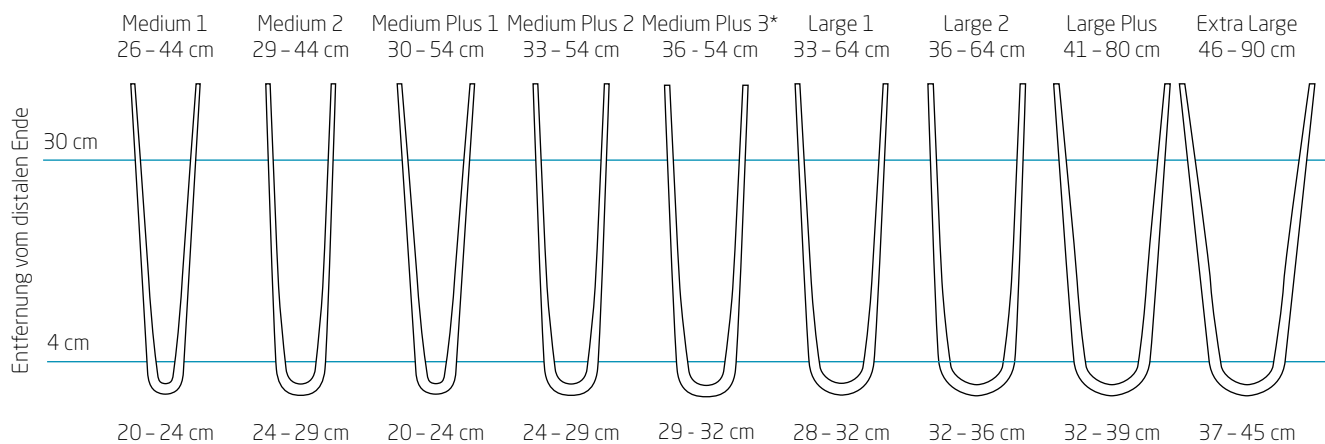

* auf Vorbestellung, nicht vorrätig

◆ Alpha® SmartTemp-Liner Uniform Größentabelle

REF Locking-Liner	Ausführung	Stoff-überzug	Gelstärke	Größe	Umfang (4 cm) distal	Umfang (30 cm) proximal
WW.T351-5360	Uniform	Select	6 mm	Medium	18 - 26 cm	23 - 36 cm
WW.T351-5364	Uniform	Select	6 mm	Medium Plus	20 - 28 cm	33 - 50 cm
WW.T351-5366	Uniform	Select	6 mm	Large	25 - 33 cm	36 - 55 cm
WW.T351-5368	Uniform	Select	6 mm	Large Plus	28 - 40 cm	40 - 60 cm
WW.T351-5367	Uniform	Select	6 mm	Extra Large	33 - 45 cm	43 - 65 cm

◆ Alpha® SmartTemp-Liner Progressive Größentabelle

REF Locking-Liner	Ausführung	Stoff-überzug	Gelstärke	Größe	Umfang (4 cm) distal	Umfang (30 cm) proximal
WW.T352-6590-1	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Medium 1	20 - 24 cm	26 - 44 cm
WW.T352-6590-2	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Medium 2	24 - 29 cm	29 - 44 cm
WW.T352-6594-1	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Medium Plus 1	20 - 24 cm	30 - 54 cm
WW.T352-6594-2	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Medium Plus 2	24 - 29 cm	33 - 54 cm
WW.T352-6594-3	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Medium Plus 3*	29 - 32 cm	36 - 54 cm
WW.T352-6596-1	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Large 1	28 - 32 cm	33 - 64 cm
WW.T352-6596-2	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Large 2	32 - 36 cm	36 - 64 cm
WW.T352-6598-1	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Large Plus	32 - 39 cm	41 - 80 cm
WW.T352-6597-1	Progressive	Select	9 - 2,5 mm	Extra Large	37 - 45 cm	46 - 90 cm

◆ Alpha® SmartTemp-Liner Uniform Größentabelle

REF Cushion-Liner	Ausführung	Stoff-überzug	Gelstärke	Größe	Umfang (4 cm) distal	Umfang (30 cm) proximal
WW.T350-5360	Uniform	Select	6 mm	Medium	18 – 26 cm	23 – 36 cm
WW.T350-5364	Uniform	Select	6 mm	Medium Plus	20 – 28 cm	33 – 50 cm
WW.T350-5366	Uniform	Select	6 mm	Large	25 – 33 cm	36 – 55 cm
WW.T350-5368	Uniform	Select	6 mm	Large Plus	28 – 40 cm	40 – 60 cm
WW.T350-5367	Uniform	Select	6 mm	Extra Large	33 – 45 cm	43 – 65 cm

◆ Alpha® SmartTemp-Liner Progressive Größentabelle

REF Cushion-Liner	Ausführung	Stoff-überzug	Gelstärke	Größe	Umfang (4 cm) distal	Umfang (30 cm) proximal
WW.T350-6590-1	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Medium 1	20 – 24 cm	26 – 44 cm
WW.T350-6590-2	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Medium 2	24 – 29 cm	29 – 44 cm
WW.T350-6594-1	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Medium Plus 1	20 – 24 cm	30 – 54 cm
WW.T350-6594-2	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Medium Plus 2	24 – 29 cm	33 – 54 cm
WW.T350-6594-3	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Medium Plus 3*	29 – 32 cm	36 – 54 cm
WW.T350-6596-1	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Large 1	28 – 32 cm	33 – 64 cm
WW.T350-6596-2	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Large 2	32 – 36 cm	36 – 64 cm
WW.T350-6598-1	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Large Plus	32 – 39 cm	41 – 80 cm
WW.T350-6597-1	Progressive	Select	9 – 2,5 mm	Extra Large	37 – 45 cm	46 – 90 cm

* auf Vorbestellung, nicht vorrätig




◆ Alpha® AK-SmartTemp-Liner


Der neue Alpha® AK-SmartTemp-Liner stellt eine Innovation im Bereich der Liner-Versorgung dar. Durch die Integration eines temperaturregulierenden Spezialgewebes auf Basis der Outlast®-Technologie ist der Liner in der Lage, Temperaturschwankungen des Stumpfes aufzunehmen und dadurch ausgleichend auf den Temperaturhaushalt des Anwenders zu wirken. Wärme oberhalb des Komfortbereichs wird aufgenommen, gespeichert und bei Unterschreiten des Komfortbereichs wieder abgegeben. In umgekehrter Weise werden Kälteeinflüsse in ihrer Auswirkung deutlich reduziert, da zuvor gespeicherte Wärme an die Oberfläche abgegeben wird. Der einzigartige SmartTemp-Liner sorgt für ein signifikantes Plus an Tragekomfort in den unterschiedlichsten Alltagssituationen.

Material	Silicone mit Outlast®
Stoffüberzug	Select
Adaption	In Locking- und Cushion-Ausführung erhältlich
Tasse	AK Symmetrical: Ziehharmonika
Kompatibilität	AK Symmetrical: zu allen Alpha® AK Symmetrical Linern

◆ AK-Symmetrical-Ausführung

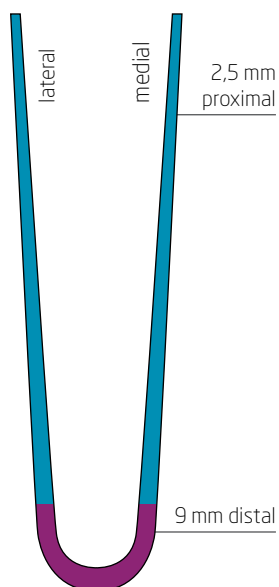

◆ Alpha® AK-SmartTemp-Liner Maßtabelle

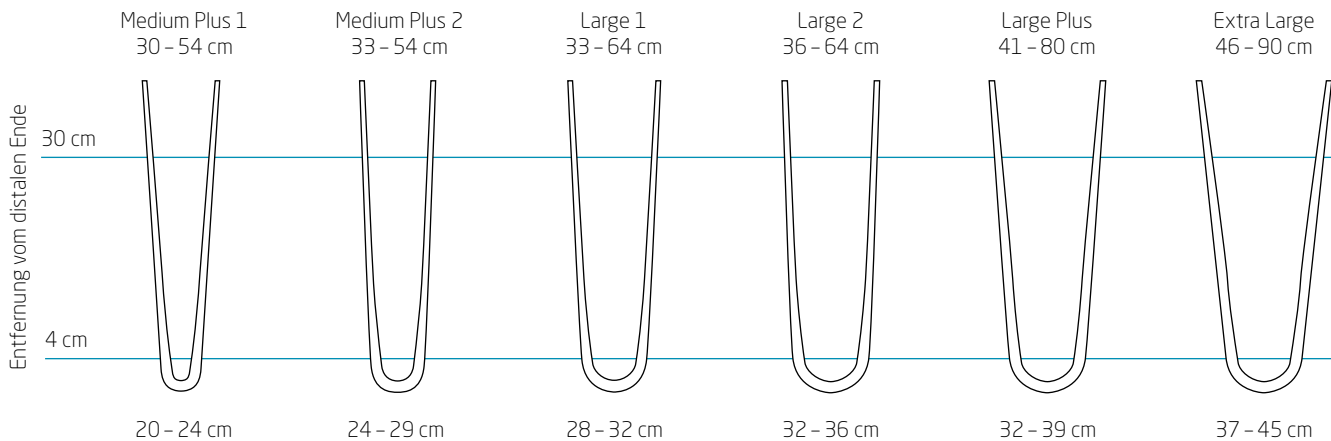

◆ Alpha® AK-SmartTemp-Liner Größentabelle

REF Locking-Liner	Ausführung	Stoff-überzug	Gel-stärke	Größe	Umfang (4 cm) distal	Umfang (30 cm) proximal
WW.T442-1694-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Medium Plus 1	20 – 24 cm	30 – 54 cm
WW.T442-1694-2	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Medium Plus 2	24 – 29 cm	33 – 54 cm
WW.T442-1696-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Large 1	28 – 32 cm	33 – 64 cm
WW.T442-1696-2	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Large 2	32 – 36 cm	36 – 64 cm
WW.T442-1698-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Large Plus	32 – 39 cm	41 – 80 cm
WW.T442-1697-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Extra Large	37 – 45 cm	46 – 90 cm

REF Cushion-Liner	Ausführung	Stoff-überzug	Gel-stärke	Größe	Umfang (4 cm) distal	Umfang (30 cm) proximal
WW.T440-1694-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Medium Plus 1	20 – 24 cm	30 – 54 cm
WW.T440-1694-2	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Medium Plus 2	24 – 29 cm	33 – 54 cm
WW.T440-1696-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Large 1	28 – 32 cm	33 – 64 cm
WW.T440-1696-2	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Large 2	32 – 36 cm	36 – 64 cm
WW.T440-1698-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Large Plus	32 – 39 cm	41 – 80 cm
WW.T440-1697-1	AK Symmetrical	Select	9 – 2,5 mm	Extra Large	37 – 45 cm	46 – 90 cm



WillowWood™

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
phone 740.869.3377 / 800.848.4930
fax 740.869.4374 / www.willowwoodco.com



Ohio Willow Wood Company B.V.
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
The Netherlands

Vertrieb durch:



Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland
Telefon: 07161 15684-0
Telefax: 07161 15684-222
www.teufel-international.com

