

# Levitate®

Freedom to Play.



Running Blades

Forever Foot



- ▶ **Levitate® Forever Foot: Der Glasfaser-Fuß für den perfekten Mix aus Alltag und Sport**
- ▶ **Levitate® Running Blades: Das Glasfaser-Blade für die Freude am Laufen**
- ▶ **Quick Change Adapter: Für den sekundenschnellen Wechsel zwischen beiden Füßen**





Forever II und Forever I

## ◆ Levitate® Forever Foot - Ihr ultimativer Begleiter!

Der Levitate® Forever Foot bietet eine unvergleichliche Kombination aus Komfort und Leistung. Durch das besondere Design und die Verarbeitung von hochwertigen Materialien wie Glasfaser und Titan bietet er eine optimale Balance zwischen Stabilität und Flexibilität.

Ob beim Erkunden von Städten oder beim Ausüben der Lieblingssportart, der Forever Foot ermöglicht ein reibungsloses und natürliches Bewegungserlebnis. Egal ob im Alltag oder auch bei sportlichen Aktivitäten – der Forever Foot ist der Begleiter für ein Leben voller Möglichkeiten.

Der Prothesenfuß ist in zwei verschiedenen Höhen und 6 Kategorien erhältlich.




### Technische Daten Forever I

<b>Gewicht des Fußes/g</b>	750 (inkl. Fußkosmetik Gr. 26)
<b>Max. Belastbarkeit/kg</b>	125
<b>Fußgrößen/cm</b>	23 - 29
<b>Systemhöhe*/mm</b>	185
<b>Absatzhöhe/mm</b>	10
<b>Proximaladapter</b>	Pyramide
<b>Kategorie</b>	1 - 3,5

### Technische Daten Forever II

<b>Gewicht des Fußes/g</b>	780 (inkl. Fußkosmetik Gr. 26)
<b>Max. Belastbarkeit/kg</b>	125
<b>Fußgrößen/cm</b>	23 - 29
<b>Systemhöhe*/mm</b>	230
<b>Absatzhöhe/mm</b>	10
<b>Proximaladapter</b>	Pyramide
<b>Kategorie</b>	1 - 3,5

\*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)

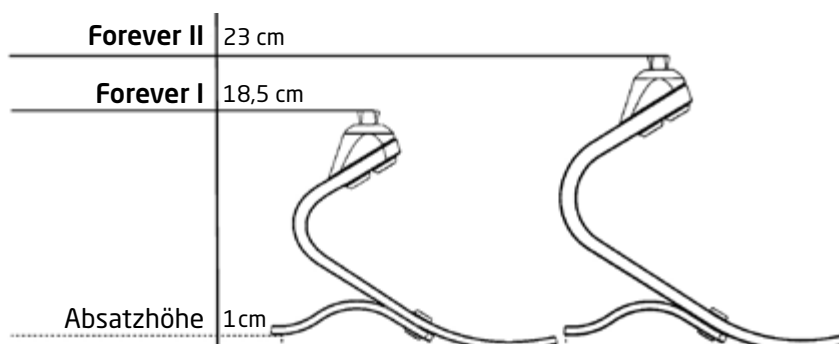



Blade 1 und Blade 2

## ◆ Levitate® Running Blades - kehren Sie zurück in Ihre sportliche Welt!

Die Levitate Running Blades wurden entwickelt, um jedem Anwender die Möglichkeit zu geben, wieder in seinen sportlichen Alltag zurückkehren zu können. Egal, ob es darum geht, mit (Enkel-)Kindern zu spielen, einen Marathon zu laufen oder einfach wieder mit Freunden Sport zu treiben - unsere Lauf-Federn unterstützen bei jeder Aktivität, in jedem Alter.

Die Glasfaser-Feder bietet optimale Dämpfung und ein sanftes Abrollverhalten, während sie auch extremen Belastungen standhält. Eine lange Haltbarkeit ist garantiert, egal wie intensiv die Bewegung ist. Mit den Levitate Running Blades die Freude an der Bewegung entdecken und zurück zu einem aktiven Leben!

Die Blades kommen in zwei verschiedenen Höhen und neun unterschiedlichen Kategorien. Die Belastbarkeit liegt bei max. 125 kg. Beide Running Blades werden standardmäßig mit der Essential Sohle in Weiß/Orange ausgeliefert.



### Technische Daten Blade 1

<b>Gewicht des Fußes/g</b>	516
<b>Max. Belastbarkeit/kg</b>	90
<b>Fußgrößen/cm</b>	one size
<b>Systemhöhe*/mm</b>	190
<b>Proximaladapter</b>	Pyramide
<b>Kategorie</b>	1 - 6

### Technische Daten Blade 2

<b>Gewicht des Fußes/g</b>	702
<b>Max. Belastbarkeit/kg</b>	125
<b>Fußgrößen/cm</b>	one size
<b>Systemhöhe*/mm</b>	250
<b>Proximaladapter</b>	Pyramide
<b>Kategorie</b>	2 - 6

\*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)



Gravel und Essential Sohle

## Essential und Gravel Sohle

Die Essential Sohle sorgt für ein optimales Erlebnis bei sportlichen Aktivitäten im Innenbereich und ist für leichte Outdoor-Aktivitäten geeignet. Zusätzlich zur Essential Sohle ist die Gravel Sohle erhältlich, die hauptsächlich für steinigtes, eher unwegsames Gelände geeignet ist und dort für den ultimativen Halt sorgt.

Die Sohlen können über zwei Schrauben einfach und schnell getauscht werden. Beide Sohlenvarianten sind in den Farben Weiß/Orange, Weiß/Pink, Weiß/Grau und Schwarz/Schwarz verfügbar.



## ◆ Quick Change Adapter - Einfaches Wechseln in Sekundenschnelle!

Dank des innovativen Quick Change Adapters kann mühelos und schnell zwischen dem Forever Foot und den Running Blades gewechselt werden - ohne großen Aufwand. Durch das clevere Design und die einfache Handhabung ist ein Wechsel ohne kompliziertes Werkzeug im Handumdrehen möglich.

Mit dem Quick Change Adapter neue Dimensionen der Flexibilität und der Bequemlichkeit in der eigenen prothetischen Versorgung entdecken.



Quick Change Adapter

Proximale Adaption	Systemhöhe/mm	Gewicht/g	Belastbarkeit/kg
Pyramide	40	185	125
Pyramidenaufnahme	26	189	125

Der Adapter wird immer mit 2 proximalen Anschlüssen geliefert (z.B. 2x Pyramidanschluss, 2x Pyramidenaufnahme oder 1x Pyramidanschluss & 1x Pyramide).

## Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes. Eine Auflistung aller zugehörigen REFs finden Sie in der aktuellen Onlineversion unserer Kataloge unter [www.wjt-ortho.com](http://www.wjt-ortho.com).

## Auswahl der Kategorie

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.  
Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Feder aus.

### Forever Foot

Erweitertes Körpergewicht/kg	Fußgröße 23-24 cm	Fußgröße 25-26 cm	Fußgröße 27-29 cm
0 - 50	1	1	-
50 - 65	1,5	1,5	-
65 - 80	2	2	2
80 - 95	2,5	2,5	2,5
95 - 110	-	3	3
110 - 125	-	3,5	3,5

### Blade 1

Erweitertes Körpergewicht/kg	Kategorieempfehlung*
0 - 15	1
15 - 30	2
30 - 45	3
45 - 60	4
60 - 75	5
75 - 90	6

### Blade 2

Erweitertes Körpergewicht/kg	Kategorieempfehlung*
30 - 40	2
40 - 50	2,5
50 - 60	3
60 - 70	3,5
70 - 80	4
80 - 90	4,5
90 - 100	5
100 - 110	5,5
110 - 125	6

\*bei einem sehr hohen Aktivitätslevel kann eine Kategorie höher gewählt werden.

## Benötigte Komponenten für den Forever Foot

Um einen Forever Foot zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig. (Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Forever 2 Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 25-26 in der gewünschten Kategorie benötigt sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts).

**1** Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

**Forever Foot Fußfeder**

**2** Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

**Fußkosmetik**

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectra-Socke





Wilhelm Julius Teufel GmbH  
Robert-Bosch-Straße 15  
73117 Wangen  
Deutschland/Germany  
Phone: +49 (0)7161 15684-0  
Fax: +49 (0)7161 15684-333  
[www.wjt-ortho.com](http://www.wjt-ortho.com)

